


基本型蠕动泵



产品型号：LabM3-III

流量范围：0.0053-1808mL/min

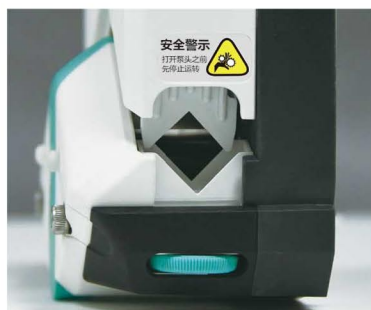

单通道



双通道

产品特点

3位LED显示电机转速，薄膜按键控制。

具有定时功能，时间范围0.5秒-999秒可作为简易分配使用。

具有RS232和RS485(标准Modbus协议)两种通讯方式。

屏幕显示



适用泵头



EasyPump系列 (可调压)



EasyPump 系列 (不可调压)



EasyPump-PPS系列 (可调压)



EasyPump-PPS 系列 (不可调压)

适用泵头 & 参考流量

泵头型号	单/双通道	软管壁厚(mm)	是否可调压
EasyPump I	单通道	1.6	不可调压
EasyPump II	单通道	2.4	不可调压
EasyPump V	双通道	1.6	不可调压
泵头型号	单/双通道	软管壁厚(mm)	是否可调压
EasyPump III	单通道	1.6	可调压
EasyPump IV	单通道	2.4	可调压
EasyPump VI	双通道	1.6	可调压

泵头型号	软管	内径×壁厚 (mm)	mL / r	流量范围(mL/min) (0.1-350rpm)	软管承压(Mpa)		重量(Kg)
					间断	连续	
单通道 EasyPump I/III	13#	0.8×1.6	0.053	0.0053~19	0.27	0.17	0.6
	14#	1.6×1.6	0.27	0.027~95			
	19#	2.4×1.6	0.55	0.055~193			
	16#	3.1×1.6	0.933	0.0933~327	0.24	0.14	
	25#	4.8×1.6	1.967	0.1967~688	0.14	0.10	
	17#	6.4×1.6	3.333	0.3333~1167	0.10	0.07	
	18#	7.9×1.6	4.3	0.43~1505			
单通道 EasyPump II/IV	15#	4.8×2.4	1.8	0.18~630	0.27	0.17	
	24#	6.4×2.4	2.733	0.2733~957	0.24	0.14	
	35#	7.9×2.4	3.833	0.3833~1342			
	36#	9.6×2.4	5.167	0.5167~1808			
双通道 EasyPump V/VI	13#	0.8×1.6	0.053	0.0053~19	0.27	0.17	
	14#	1.6×1.6	0.27	0.027~95			
	19#	2.4×1.6	0.55	0.055~193			
	16#	3.1×1.6	0.933	0.0933~327			
	25#	4.8×1.6	1.967	0.1967~688	0.24	0.14	

技术参数

转速分辨率	0-100转范围内,0.1 转/分钟; 100-600转范围内,1 转/分钟	启停、换向信号	无源开关量信号,如:脚踏开关; 有源开关量信号:5-24V通用
测试时间范围	0.5秒-999秒	通讯接口	RS232,申辰通信协议, RS485Modbus 协议(RTU 模式)
出口压力	1.6-2.4mm壁厚软管:01~0.27Mpa		
显示方式	3位LED	适用电源	AC 220V±10% 50Hz/60Hz (标配) AC 110V±10% 50Hz/60Hz (选配)
操控方式	按键操控		
按键寿命	30万次	驱动尺寸(L×W×H)	323×157×237 mm
外控调速信号	0-5V, 0-10V, 4-20mA 任选	驱动器重量	4.40 kg
防护等级	IP31	消耗功率	<80W

尺寸图 (Unit:mm)

